

# Intelect<sup>®</sup> Focus Shockwave

## Caratteristiche

### *LDC touch screen*

Per un facile controllo

### *Trasportabile*

Semplice da spostare

### *3 diversi manipoli*

Per un'efficacia terapeutica ottimale

### *Profondità di lavoro a 12,5 cm con fuoco puntiforme*

Profondità adeguata al trattamento di numerose patologie

### *Rilascio di energia: 0,01 - 0,55 mj/mm<sup>2</sup>*

Forte stimolazione dei cambiamenti metabolici

### *Ampia variazione di frequenza: 1 - 8 Hz*

Personalizzazione del trattamento secondo le necessità del paziente


La potenza delle onde d'urto focali, a differenza delle onde d'urto radiali, permette di ridurre calcificazioni o calcoli e indurre la rigenerazione dei tessuti, oltre ad offrire i seguenti benefici collegati alla terapia delle onde d'urto:

- Attivazione dei processi di guarigione
- Stimolazione della circolazione sanguigna
- Rigenerazione dei tessuti

## Indicazioni

- Tendinopatia achillea
- Fascite plantare
- Sindrome del tibiale anteriore
- Tendinite calcifica
- Tendinite rotulea
- Epicondilita
- Metatarsalgia
- Trigger points: dolore periarticolare della spalla

### *Distanziatori e profondità di lavoro del manipolo F-SW*

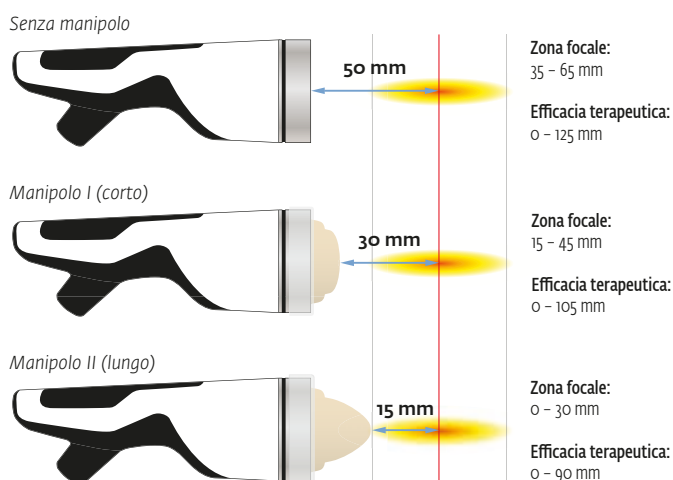

## Scheda tecnica

Modalità operativa di F-SW	F-SW: colpo singolo, multiplo 1 - 8Hz
Selezione potenza di F-SW	Progressiva da 0,01 a 0,55 mJ/mmq
Voltaggio d'ingresso	100 - 240 VAC
Frequenza	50 / 60 Hz
Fusibile	T5AL/250 VAC
Consumo energetico	max. 450 VA
Temperatura durante l'utilizzo	10 - 30 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	0 - 60 °C senza condensa
Pressione durante il trasporto e lo stoccaggio	500 - 1060 hPa
Pressione durante l'utilizzo	800 - 1060 hPa
Umidità dell'aria	5 - 95%, non-condensing
Peso dello strumento	22.1 kg
Peso del manipolo	770 g
Dimensioni	(L x A x P) 450 x 165 x 530 mm
Classificazione MDD	Dispositivo Classe IIb
Grado di impermeabilizzazione	IPX1

## Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione prodotto
<b>21090</b>	<b>Kit intellect F-SW, che include:</b>
- 21095	Unità base Intellect F-SW ROW
- 19000	Manipolo per F-SW
- 4600	Borsa dell'acqua
- 4700	Olio silconico
- 4248	Gel
- 13-00061	Manuale di istruzione
- 0.0032.012	Cavo alimentazione EU

<b>4650</b>	<b>Carrello F-SW (opzionale)</b>
-------------	----------------------------------

### Accessori per Manipolo F-SW

19100	Distanziatore I (30mm)
19200	Distanziatore II (15 mm)
19300	Anello di chiusura trasparente per i Distanziatori I e II

DJO Italia srl | Via Leonardo da Vinci, 97 | 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) | ITALIA  
 Tel.: +39 02 48463386 - 800 891607 | Fax: +39 02 48409217 - 800 070977 | Email: ordini@DJOglobal.com  
[www.international.chattgroup.com](http://www.international.chattgroup.com)



**MOTION IS MEDICINE<sup>+</sup>**